

Новый формат мойки и дезинфекции лабораторной посуды

ДИАМ
современная лаборатория

Miele
PROFESSIONAL

Посудомоечные машины Miele стали еще эффективнее!



Моечные машины **Miele** применяются для автоматической мойки, сушки и дезинфекции всех видов лабораторной посуды. Машины **Miele** удаляют сильные загрязнения, в т.ч. органические кислоты, амины, оксиды металлов, кровь, животные жиры, масла, воск и парафин. Мойка осуществляется в закрытом объеме, предотвращая возможную контаминацию. Моечные машины **Miele** имеют модульную конструкцию с одним или двумя уровнями загрузки посуды; очень большой выбор корзин, тележек, насадок, простых в подключении.



Особенности моечных машин **Miele**:

- система контроля давления струй и вращения коромысел, распознающая снижение давления в струе и блокировку коромысла;
- контроль чистоты ополаскивания;
- высокоэффективная сушка горячим воздухом;
- производительность за цикл – 128 колб/бутылей, 98 пипеток, 130 единиц колб/бутылей при смешанной загрузке;
- циркуляционный насос с регулируемым числом оборотов для создания оптимального давления мойки;
- удобное расположение дверцы для регенерирующей соли, до двух кг;
- подсоединение корзин с задней стороны моечной камеры, короткие пути подачи воды сокращают потери давления и температуры;
- гладкие швы внутри камеры обеспечивают легкую очистку и дезинфекцию камеры;
- широкий выбор заводских программ для мойки любого типа стекла, а также возможность создания индивидуальных программ;

Посудомоечные машины Mile

- 1 или 2 встроенных дозирующих насоса жидких моющих средств и/или средств нейтрализации или дозатор порошковых моющих средств в дверце;
- система конденсации пара для работы без подключения к вентиляционной системе;
- функция автоматического закрывания/открывания дверей;
- корпус белый или из н/ж стали; встраиваемые модели и отдельно стоящие.

Особенности моделей серии PGxx



PG 8583 отдельно стоящая или встраиваемая

- Сушка **EcoDry**, по окончании которой дверь автоматически открывается (функция **AutoOpen**) при достижении в камере 70 °С, тем самым способствуя удалению лишней влаги и ускоренной сушке посуды;
- 1 или 2 дозирующих насоса, канистры с моющими средствами стоят возле машины;
- габариты, ШхГхВ, мм – 600х600х (820)835.

PG 8593 отдельно стоящая или встраиваемая

- Сушка горячим воздухом **DryPlus**, особенно эффективна в отношении узкогорлой посуды;
- 1 дозирующий насос, канистры с моющими средствами стоят возле машины;
- габариты, ШхГхВ, мм – 600х600х(820)835.




PG 8583 CD встраиваемая

- Сушка горячим воздухом **DryPlus**, особенно эффективна в отношении узкогорлой посуды;
- 2 дозирующих насоса;
- наличие выдвигающего отсека для 5 л канистр с моющим и нейтрализующим средствами;
- габариты, ШхГхВ, мм – 900х700х835.

Моечная машина для стеклянных пипеток ScrubAir, Labconco

ScrubAir компактная машина для мытья и сушки стеклянных пипеток, обеспечивает экономию времени и воды до 98% по сравнению с сифонным методом мытья пипеток.

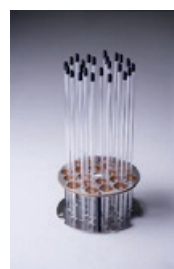

- Емкость – от 12 до 60 пипеток за 1 раз; для пипеток d 3,4 – 8,6 мм;
- специальный держатель с силиконовыми вставками для пипеток тоньше 3,4 мм;
- цикл полной мойки и сушки занимает менее 3,5 часов;
- автоматическая сушка; функция отложенного старта до 8 часов;
- работа с водопроводной и очищенной водой;
- габариты, мм – 376х473х856.

ООО «Диаэм»

Москва

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 • тел./факс: (495) 745-0508 • sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

Новосибирск

пр. Академика
Лаврентьева, д. 6/1
тел./факс:
(383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Казань

ул. Парижской
Коммуны, д. 6
тел./факс:
(843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

С.-Петербург

ул. Профессора
Попова, д. 23
тел./факс:
(812) 372-6040
spb@dia-m.ru

**Ростов-
на-Дону**

пер. Семашко, д. 114
тел./факс:
(863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Пермь

Представитель
в УФО
тел./факс:
(342) 202-2239
perm@dia-m.ru

Воронеж

Представитель
тел./факс:
(473) 232-4412
voronezh@dia-m.ru

Армения

Представитель
тел.
094-01-01-73
armenia@dia-m.ru

Узбекистан

Ташкент
тел.
+998 90 3548569
uz@dia-m.ru