




Боксы для хранения
Eppendorf Storage Boxes

Боксы для хранения Eppendorf Storage Boxes



Боксы для хранения Eppendorf Storage Boxes предназначены для хранения и архивирования проб. Это оптимальное решение для всех видов пробирок.

Новая продуктовая линейка боксов для хранения включает 9 видов боксов

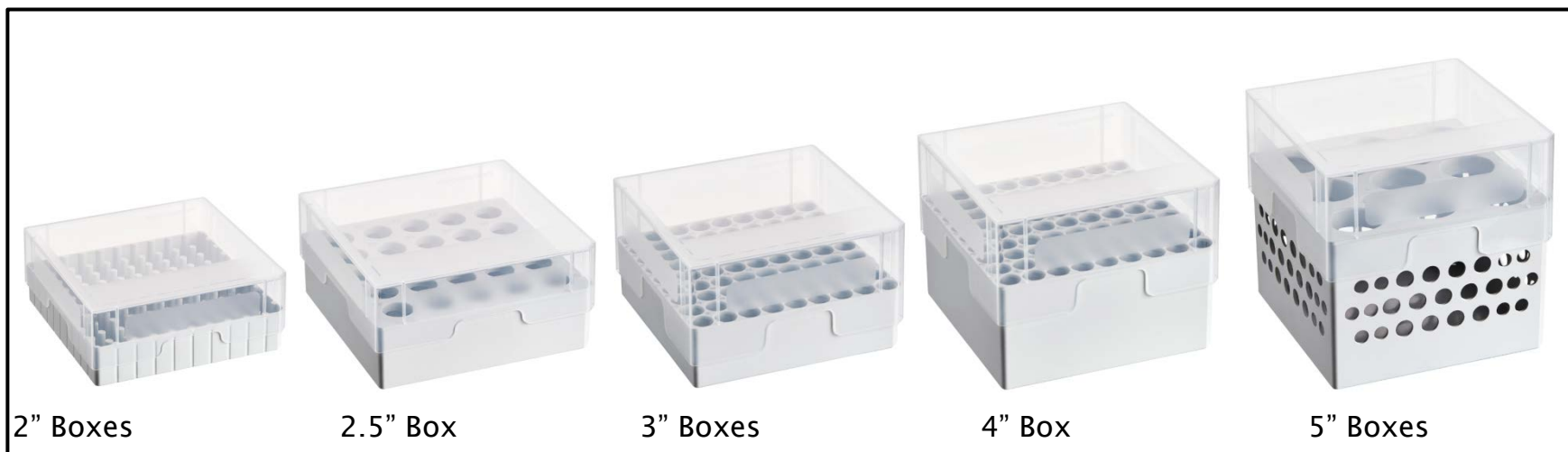

2" Boxes

2.5" Box

3" Boxes

4" Box

5" Boxes

10 x 10 Bottom

9 x 9 Tray

9 x 9 Tray

9 x 9 Tray

8 x 8 Tray

5 x 5 Tray

5 x 5 Tray

5 x 5 Tray

3 x 3 Tray

9 видов боксов - информация для заказа

Информация для заказа	
Описание	№ для заказа
Бокс для хранения 10 x 10, для 100 криогенных пробирок с внутр. резьбой, 3 шт., высота – 52,8 мм, 2 дюйма, полипропилен, для использования при температуре до -86 °С, автоклавируемый, с крышкой и буквенно-цифровой маркировкой	0030 140.508
Бокс для хранения 9 x 9, для 81 пробирки (криоген.) с закручивающейся крышкой, 1–2 мл, 3 шт., высота – 52,8 мм, 2 дюйма, полипропилен, для использования при температуре до -86 °С, автоклавируемый, с крышкой и буквенно-цифровой маркировкой	0030 140.516
Бокс для хранения 9 x 9, для 81 пробирки (криоген.) с закручивающейся крышкой, 3 мл, 2 шт., высота – 76,2 мм, 3 дюйма, полипропилен, для использования при температуре до -86 °С, автоклавируемый, с крышкой и буквенно-цифровой маркировкой	0030 140.540
Бокс для хранения 9 x 9, для 81 пробирки (криоген.) с закручивающейся крышкой, 4–5 мл, 2 шт., высота – 101,6 мм, 4 дюйма, полипропилен, для использования при температуре до -86 °С, автоклавируемый, с крышкой и буквенно-цифровой маркировкой	0030 140.567
Бокс для хранения 8 x 8, для 64 пробирок 1–2 мл, 3 шт., высота – 52,8 мм, 2 дюйма, полипропилен, для использования при температуре до -86 °С, автоклавируемый, с крышкой и буквенно-цифровой маркировкой	0030 140.524
Бокс для хранения 5 x 5, для 25 пробирок 5 мл, 4 шт., высота – 63,5 мм, 2,5 дюйма, полипропилен, для использования при температуре до -86 °С, автоклавируемый, с крышкой и буквенно-цифровой маркировкой	0030 140.532
Бокс для хранения 5 x 5, для 25 пробирок 5 мл, 2 шт., высота – 76,2 мм, 3 дюйма, полипропилен, для использования при температуре до -86 °С, автоклавируемый, с крышкой и буквенно-цифровой маркировкой	0030 140.613
Бокс для хранения 5 x 5, для 25 пробирок 15 мл, 2 шт., высота – 127 мм, 5 дюймов, полипропилен, для использования при температуре до -86 °С, автоклавируемый, с крышкой и буквенно-цифровой маркировкой	0030 140.583
Бокс для хранения 3 x 3, для 9 пробирок 50 мл и 4 пробирок 15 мл, 2 шт., высота – 127 мм, 5 дюймов, полипропилен, для использования при температуре до -86 °С, автоклавируемый, с крышкой и буквенно-цифровой маркировкой	0030 140.591


Основные характеристики: удобные и стабильные

- > 9 различных форматов позволяют оптимально использовать имеющееся в морозильнике пространство
- > Сделаны из полипропилена, что обеспечивает стабильность в широком диапазоне температур от $-86\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $121\text{ }^{\circ}\text{C}$
- > Можно автоклавировать ($121\text{ }^{\circ}\text{C}/20$ мин.)
- > Боксы можно мыть в посудомоечной машине, что позволяет быстро и безопасно их почистить



Основные характеристики: надежные

- > Быстрое нахождение пробы благодаря нанесенной лазером буквенно-цифровой кодировке каждой пробы:
 - > Уменьшает риск ошибки
 - > Обеспечивает высокий контраст, что облегчает читаемость
 - > Остается постоянным
 - > 5 дополнительных полей для надписей на крышке для нанесения индивидуальной маркировки

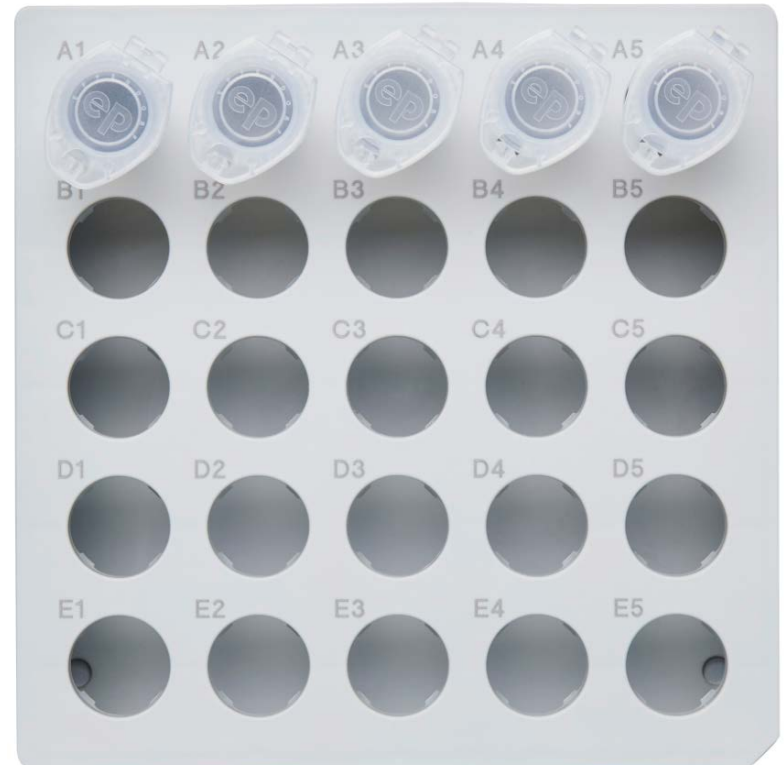

Основные характеристики: инновационные и безопасные

- > Боксы для конических пробирок на 15 и 50 мл имеют отверстия для вентиляции, что гарантирует равномерность процесса замораживания
- > Это предотвращает повреждение или растрескивание пробирок, которое часто наблюдается при замораживании длинных пробирок в закрытых боксах



Кому могут быть интересны боксы для хранения

- > Боксы для хранения нужны всем лабораториям, которые хранят или архивируют пробы
- > Совместимость со всеми стандартными форматами пробирок и морозильными стеллажами делает их универсальными и позволяет найти применение в различных областях и различных лабораториях
- > Боксы прекрасно дополняют другую продукцию от Eppendorf:
 - > ... морозильники Eppendorf
 - > ... стеллажи
 - > ... пробирки Eppendorf



Информационные материалы


Флайер “Out of the Box”

- Общая информация о продукции и обзор преимуществ



Статья “Reliable Storage”

- Общая статья о преимуществах боксов Eppendorf Storage Boxes

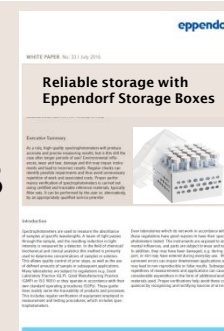

- Совместимость с пробирками
- Совместимость с морозильниками / стеллажами

Box Model	Dimensions (mm)	Volume (ml)	Compatible Pipette Tips	Compatible Racks
ST100	100 x 100 x 40	100	0.1-10 µl tips	96-well rack
ST200	200 x 100 x 40	200	0.1-10 µl tips	96-well rack
ST500	500 x 100 x 40	500	0.1-10 µl tips	96-well rack
ST1000	1000 x 100 x 40	1000	0.1-10 µl tips	96-well rack
ST2000	2000 x 100 x 40	2000	0.1-10 µl tips	96-well rack

- Обзор основных параметров размеров

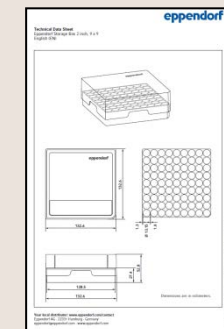


Таблица совместимости

Технические данные



Eppendorf Storage Boxes

Спасибо за внимание!