


Набор светодиодных световых планок

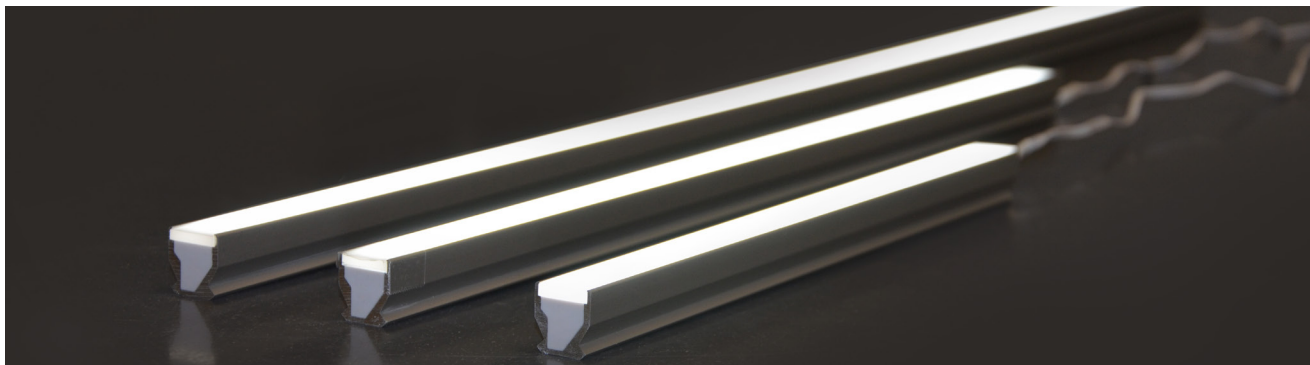

Для моделей серий KB, KT и KBF

Наборы светодиодных световых планок предназначены для освещения внутреннего пространства климатических камер BINDER различных серий и размеров, требующих низкой интенсивности света. Монтаж осуществляется просто, с возможностью гибкого позиционирования. Высококачественные светодиодные модули белого света в водозащищенном исполнении прочно закреплены в алюминиевых профильных рейках.

Световые рейки трех вариантов длины предлагаются в базовых наборах, которые также включают крепежный материал и блок управления. Набор для расширения позволяет подключить еще две световые планки к блоку управления, оснащенного диммером для регулировки интенсивности освещения и цифровым таймером для управления временем включения и отключения.

БАЗОВЫЙ НАБОР СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТОВЫХ ПЛАНОК:

- Базовый набор 300 Арт. № 8012-1107
- Базовый набор 500 Арт. № 8012-1108
- Базовый набор 900 Арт. № 8012-1109

Комплект поставки:

- 2 светодиодные световые планки
- Монтажный комплект:
4 крепежных зажима из пружинной стали
6 крепежных зажимов из пластика
двусторонний скотч tesa Powerstrips®
- Блок управления, позволяющий подключить до 4 световых планок



Комплект поставки базового набора

НАБОР СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТОВЫХ ПЛАНОК — РАСШИРЕНИЕ:

- Набор для расширения 300 Арт. № 8012-1716
- Набор для расширения 500 Арт. № 8012-1717
- Набор для расширения 900 Арт. № 8012-1718

Комплект поставки:

- 2 светодиодные световые планки
- Монтажный комплект:
4 крепежных зажима из пружинной стали
6 крепежных зажимов из пластика
двусторонний скотч



Комплект поставки набора для расширения


ПРИМЕРЫ КРЕПЛЕНИЯ



Световая планка 60 см, прикреплена при помощи tesa Powerstips® к потолку камеры



Световая планка 60 см, прикреплена при помощи пластиковых зажимов® к решетчатой вставной полке

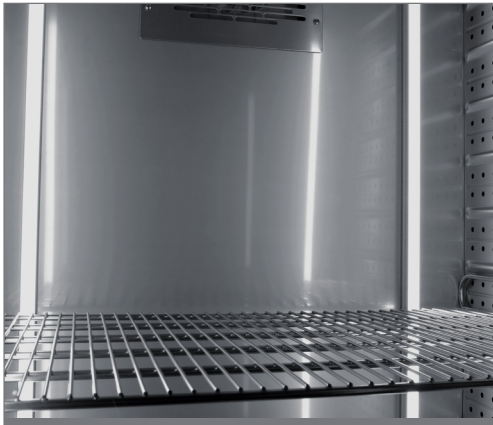

Световая планка 90 см, прикреплена при помощи tesa Powerstips® к задней стенке камеры



Световая планка 30 см, прикреплена при помощи tesa Powerstips® к стенке камеры

СООТВЕТСТВИЕ РАЗМЕРОВ МОДЕЛЯМ КВ, КТ И КВФ

| | Модель 53 | Модель 115 | Модель 170 | Модель 240 | Модель 400 | Модель 720 | Модель 1020 |
|-------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Набор 300 (30 см) | • | • | • | • | • | • | • |
| Набор 500 (50 см) | - | • | • | • | • | • | • |
| Набор 900 (90 см) | - | - | - | - | • | • | • |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: СВЕТОВЫЕ ПЛАНКИ

| | | | |
|--|----------------------------|--------|--------|
| Длина: | 30 см | 50 см | 90 см |
| Интенсивность освещения (расстояние: 12 см): | 540 лк | 670 лк | 690 лк |
| Цвет света: | 6.500 K (холодный дневной) | | |
| Рабочий диапазон температур | -10...60 °C | | |
| Степень защиты | IP 65 | | |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

| | |
|-----------------|---|
| Напряжение сети | 100–240 В |
| Диммер: | 0–100 % |
| Таймер: | цифровой, дневная и недельная программа |
| Крепление: | с помощью магнита к камере |

ООО «Диаэм»

Москва
ул. Магаданская, 7/3
тел./факс:
(495) 745-0508
sales@dia-m.ru

Новосибирск
пр. Акад.
Лаврентьева, 6/1
тел./факс:
(383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Казань
ул. Парижской
Коммуны, д. 6
тел./факс:
(843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

С.-Петербург
ул. Профессора
Попова, 23
тел./факс:
(812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
пер. Семашко, 114
тел./факс:
(863) 250-0006
rnd@dia-m.ru

Пермь
Представитель
в УФО
тел./факс:
(342) 202-2239
perm@dia-m.ru

www.dia-m.ru

Воронеж
Представитель
тел./факс:
(473) 232-4412
voronezh@dia-m.ru

Армения
Представитель
тел.
094-01-01-73
armenia@dia-m.ru