

# Ультразвуковые бани, мойки, дегазаторы. Пароочистители. Сушильные камеры



Ultrasonics. Steam. Ultraclean.

## Ультразвуковые мойки серии Easy – доступно и эффективно!

Ультразвуковые мойки – способ очистки инструментов сложной конфигурации без применения сильнодействующих чистящих средств. Эффективность ультразвуковой очистки основывается на высокочастотных звуковых колебаниях, которые являются причиной возникновения сильной кавитации в жидкости. Микроскопические пузырьки взрываются на поверхности, обрабатываемого объекта, удаляя любые виды загрязнений быстро и эффективно. Ультразвуковые мойки незаменимы для глубокой очистки капилляров, пипеток, многоруночных планшетов, химической посуды и различных деталей сложной формы, изготовленных из различных материалов (металл, стекло, полимер и др.)



- Электронный контроль времени и нагрева
- Светодиодная индикация температуры
- Индикация перегрева чистящего раствора
- Система экстренного отключения

После обработки в ультразвуковых банях можно использовать **сушильные установки**. Встроенная система обдува горячим (70 °С) и холодным воздухом позволяет осуществлять мягкую сушку даже самых чувствительных деталей. При использовании холодного воздуха процесс происходит так же быстро и эффективно. В холодном режиме детали могут быть дополнительно быстро охлаждены. 3 модели: 1,9, 9,0 и 20,6 л.



1071646	Ультразвуковая мойка 0,8 л, нагрев, таймер, крышка, корзинка, Easy 10H	536,=
1071648	Ультразвуковая мойка 0,8 л, таймер, крышка, корзинка, Easy 10	443,=
1071652	Ультразвуковая мойка 1,75 л, нагрев, таймер, крышка, корзинка, Easy 20H	536,=
1071655	Ультразвуковая мойка 1,75 л, таймер, крышка, корзинка, Easy 20	450,=
1071656	Ультразвуковая мойка 2,75 л, нагрев, таймер, крышка, корзинка, Easy 30H	675,=
1071664	Ультразвуковая мойка 4,25 л, нагрев, таймер, крышка, корзинка, Easy 40H	962,=
1071669	Ультразвуковая мойка 9,5 л, нагрев, таймер, крышка, корзинка, Easy 100H	1 438,=
1071671	Ультразвуковая мойка 12,75 л, нагрев, таймер, крышка, корзинка, Easy 120H	1 782,=
1071673	Ультразвуковая мойка 18 л, нагрев, таймер, крышка, корзинка, Easy 180H	1 989,=
1079017	Ультразвуковая мойка 28 л, нагрев, таймер, крышка, корзинка, Easy 300H	2 444,=
1078542	Установка сушильная 9,0 л, с корзиной, Elmadry TD 120, Elma	1190,=
1082175	Установка сушильная, 1,9 л, с корзиной, Elmadry TD 30, Elma	569,=
1078575	Установка сушильная, 20,6 л, с корзиной, Elmadry TD 300, Elma	1536,=

Цены указаны на ноябрь 2018

**Elma** выпускает ультразвуковые бани **от 0,8 л до 215 л**, с рабочей частотой **25, 35, 37 и 45 КГц**; одноволновые и двухволновые (на низкой частоте проводят интенсивную очистку, на высокой частоте – мягкую очистку); с подогревом и без подогрева. Все модели выполнены в корпусе из нержавеющей стали, имеют уникальную функцию **Sweep**, которая обеспечивает гомогенное распределение звукового поля по всей ванне. Функция **Pulse** – импульсный режим с увеличенной на 20% пиковой мощностью ультразвука. Функция **Degas** – режим быстрой дегазации растворителей для ВЭЖХ и прочих жидкостей. Функция **Auto Degas** – автоматический цикл дегазации растворителей. Режим **Dynamic** обеспечивает увеличение мощности ультразвука и равномерность процесса очистки.



## Серия Elmasonic S

«базовая» серия


- 24 модели от 0,8 до 90 л
- Частота – 37 кГц
- Функции: **Sweep, Degas**



## Серия Elmasonic P

модели с увеличенной мощностью

- 6 моделей от 2,75 до 28 л
- Частота – 37 и 80 кГц
- Функции: **Sweep, Pulse, Degas, Auto Degas**

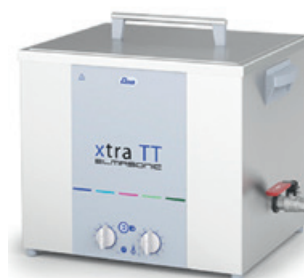

## Серия Elmasonic Xtra TT

модели с нагревателями

- высокая мощности
- 2, 5, 120 и 200 л
- Частота – 37 кГц
- Функции: **Sweep, Pulse, Dynamic**



## Серия Elmasonic Xtra ST

напольные ультразвуковые ванны

- 8 моделей от 22 до 70 л
- Частота – 25 и 45 кГц
- Функции: **Sweep, Pulse, Dynamic**



## Серия Elmasonic TI-H

многочастотные ультразвуковые ванны

- 9 моделей от 4,7 до 180 л
- Частота – 25 и 45 кГц или 35 и 130 кГц
- Функции: **Sweep, Degas**



## Серия Elmasonic Denta Pro

для мелкого инструмента

- Объем ванны, л – 2,75
- Частота – 37 кГц
- Функции: **Sweep, Degas**

Для сильных загрязнений можно использовать предварительную обработку **пароочистителями с давлением пара 4,5 и 8 бар**. Микроскопические частицы пара проникают в труднодоступные места и растворяют загрязнения, такие как кровь, жир и остатки тканей. Никакие химические чистящие средства не используются, поэтому на чистых поверхностях не образуются остатки накипи или чистящего средства.



**000 «Диаэм»**

Москва

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

[www.dia-m.ru](http://www.dia-m.ru)

### Новосибирск

пр. Академика  
Лаврентьева, д. 6/1  
тел.  
(383) 328-0048  
nsk@dia-m.ru

### Казань

ул. Парижской  
Коммуны, д. 6  
тел.  
(843) 210-2080  
kazan@dia-m.ru

### С.-Петербург

ул. Профессора  
Попова, д. 23  
тел.  
(812) 372-6040  
spb@dia-m.ru

### Ростов-на-Дону

пер. Семашко, д. 114  
тел.  
(863) 303-5500  
rnd@dia-m.ru

### Пермь

Представитель  
тел.  
(342) 202-2239  
perm@dia-m.ru

### Воронеж

Представитель  
тел.  
(473) 232-4412  
voronezh@dia-m.ru

### Армения

Представитель  
тел.  
(094) 01-0173  
armenia@dia-m.ru

### Узбекистан

Представитель  
тел.  
(90) 354-8569  
uz@dia-m.ru